

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Грелка-массажер электрическая для ног

FOOT COMFORT



СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ.....	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
ОПИСАНИЕ ТОВАРА	7
ИНСТРУКЦИЯ.....	7
БЛОК-СХЕМА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.....	8
ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
НЕИСПРАВНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	9

БЕЗОПАСНОСТЬ

Важное внимание для безопасности: перед использованием продукта, пожалуйста, прочитайте все инструкции в деталях.

1. Не допускается использование источника питания, кроме 220 В;
2. Если машина не используется, обязательно вытащите вилку из розетки. Если машина не используется ежедневно или оборудование / компонент будет демонтирован, выньте вилку из розетки.
3. Во избежание возгорания, поражения электрическим током или травм, пожалуйста, не работайте с изделиями под колоннами, одеялами или другими крышками.
4. Если продукт используется или рядом с детьми, взрослые опекуны должны наблюдать за людьми с физическими и умственными нарушениями и инвалидностью.
5. Обязательно используйте этот продукт в целях, описанных в руководстве пользователя. Не используйте не рекомендованные производителем детали.
6. Не тяните и не тяните за шнур питания, чтобы переместить изделие, и не используйте шнур питания в качестве ручки.
7. Шнур питания должен находиться на безопасном расстоянии от нагреваемой поверхности.
8. Не вставляйте и не роняйте предметы в отверстия устройства.
9. Не используйте этот продукт на открытом воздухе.
10. Не используйте продукт в местах, наполненных распыляемыми материалами или кислородом.
11. Когда питание отключено, отключите все органы управления и выньте вилку из розетки.
12. Обязательно контролируйте и проверяйте, чтобы дети не использовали массаж в качестве оборудования для развлечений, чтобы обеспечить их безопасность.

Внимание: Повреждение шнура питания или штепсельной вилки, повреждение, вызванное сильным падением на землю, падением в воду или другой неправильной эксплуатацией, пожалуйста, вернитесь в центр технического обслуживания для осмотра и ремонта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Использование

1) Пожалуйста, не используйте массажное оборудование в среде с чрезмерной влажностью или плотной пылью, чтобы избежать поражения электрическим током или поломки машины.

2) Пожалуйста, не используйте оборудование в местах с температурой выше 40 ° C.

3) Пожалуйста, не размещайте массажное оборудование рядом с обогревателем, плитой или под прямыми солнечными лучами.

4) Массажное оборудование предназначено для индивидуального использования. Пожалуйста, не используйте его в коммерческих целях.

Осторожно! Массажное оборудование может использоваться только в помещении.

- Если массажное оборудование используется при довольно низкой температуре. Пожалуйста, не повышайте температуру внезапно. Предлагается регулировать температуру, чтобы она находилась в нормальных пределах перед работой.

- Если массажное оборудование перемещается из места хранения с относительно низкой температурой в теплую среду, это может повлиять на нормальную работу оборудования из-за скопления влаги в машине. В серьезных условиях это может даже привести к неисправности машины. После перемещения рекомендуется вращать продукт в течение одного часа при нормальной комнатной температуре перед использованием.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование массажного аппарата, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации

перед использованием. Если тканевая крышка массажного аппарата сломалась, не используйте.

- Во избежание уменьшения эффекта массажа или повреждения оборудования, пожалуйста, не используйте его вместе с другим лечебным оборудованием, таким как электрическое одеяло.
- Пожалуйста, не используйте оборудование в течение одного часа после еды, чтобы избежать неблагоприятного воздействия.
- Пожалуйста, не используйте массажное оборудование с мокрыми руками или телом.
- Непрерывная работа жаберной кости более 5 минут в одной и той же части тела может привести к чрезмерной стимуляции и обратному эффекту.
- Не вставляйте никакие предметы или горючие предметы в массажер. Следовательно, это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт во время массажа, немедленно остановитесь.
- Не накрывайте массажер во время использования, чтобы температура не была слишком высокой, чтобы вызвать падение или пожар.
- Этот продукт не используется в качестве самодиагностики или лечения: при необходимости диагностики или лечения должен обращаться профессиональный медицинский персонал.
- Если вы получаете лекарство или медицинский статус, проконсультируйтесь с врачом перед его использованием. Если вы чувствуете себя некомфортно или беременны, не используйте этот продукт.
- Во время беременности или физиогномики проконсультируйтесь с врачом и следуйте советам врача.
- Рекомендуемое время использования 15 минут. Перед повторным использованием убедитесь, что массажер был отключен от сети и прекратил использование более чем на 10 минут. При непрерывном использовании в течение длительного периода времени защита от перегрева может быть активирована, и питание будет автоматически отключено.

- Если поверхность прибора горячая, необходимо обратить внимание на человека, который не чувствителен к теплу.

Советы:


1. Избегайте использования массажера после питья или когда вы чувствуете дискомфорт.
2. Не массируйте голову, локтевые суставы, колени, грудь, живот прямо.
3. Снимите штепсельную вилку с розетки сразу же, когда жидкость будет пролита или сброшена на массажер. Когда обе руки мокрые, не вставляйте и не отключайте источник питания.
4. Не повредите шнур питания и не работайте с массажером, если шнур питания поврежден, что может привести к случайному поражению электрическим током или падению детали.

Неправильные условия для использования массажного оборудования:

В случае следующих условий, пожалуйста, выключите оборудование и немедленно отключите питание, а затем свяжитесь с нашей компанией.

- 1) Вода проливается на массажное оборудование. Это может привести к поражению электрическим током.
- 2) Тканевый чехол массажного оборудования сломан, и внутренняя часть машины подвергается воздействию.
- 3) При массаже, если есть какое-либо ненормальное состояние или серьезная боль, пожалуйста, немедленно прекратите массаж и попросите медицинской помощи.
- 4) Если при работе наблюдается какая-либо неисправность или неисправность механической части, немедленно прекратите использование.
- 5) Если в процессе работы происходит приостановка подачи электроэнергии, пожалуйста, обратите внимание, чтобы не повредить пользователю внезапным восстановлением подачи электроэнергии.
- 6) В молнии, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией для детального осмотра.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

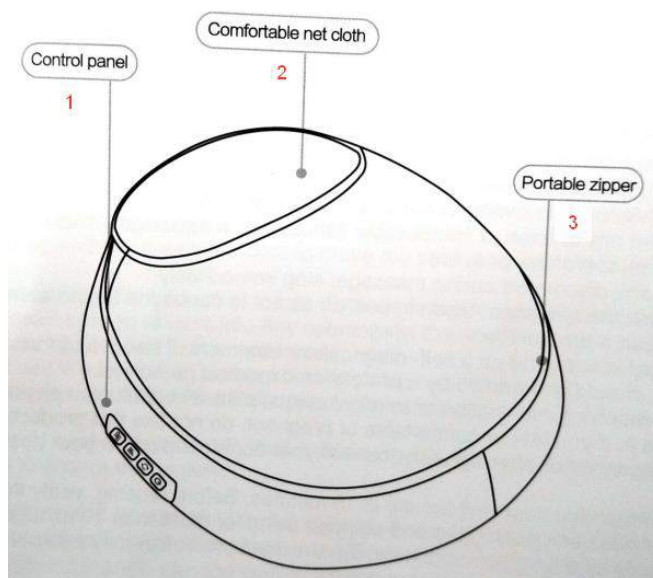

1. Панель управления
2. Приятная ткань
3. Портативная молния


Спецификация продукта	
Название продукта	Массажер
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная мощность	24 Вт
Исполнительный стандарт	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

ИНСТРУКЦИЯ

1. Прикрепите массажер к той части, где требуется массаж.
2. Подсоедините адаптер питания к разъему питания постоянного тока массажера, а затем вставьте его в разъем, и массажер перейдет в режим ожидания.
3. Нажмите кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ», войдите в автоматический режим массажа (положительное и обратное автоматическое переключение).

4. Нажмите кнопку «теплый выключатель», чтобы выбрать теплый массаж. Нажмите для теплого старта, затем нажмите для прогрева.
5. Нажмите «вперед и назад», чтобы изменить направление массажа массажной головки. Нажмите для положительного массажа, затем нажмите для обратного массажа.
6. Нажмите кнопки переключателей скорости, чтобы выбрать скорость, всего можно отрегулировать три скорости. С каждым толчком скорость увеличивается. Когда скорость максимальная, нажмите скорость, чтобы стать начальной скоростью.
7. Нажмите выключатель питания, чтобы отключить функцию, аппарат перейдет в режим ожидания.
8. Отключите массажер и выключите его.

БЛОК-СХЕМА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

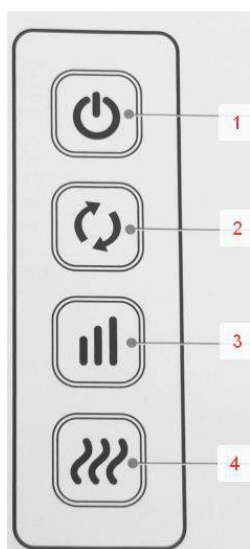

1. Выключатель
2. Питания вперед и назад
3. Переключатель скорости
4. Переключатель обогрева

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. При ежедневной чистке, пожалуйста, используйте нейтральное моющее средство и протрите мягкой тканью. Запрещено использовать эрозионное моющее средство.
2. Если кабель питания поврежден, специалисты технического обслуживания магазина, назначенного производителем, могут заменить кабель, что позволит избежать несчастных случаев.
3. При установке оборудования или чистке оборудования, пожалуйста, отсоедините кабель питания, чтобы избежать опасности.
4. Пожалуйста, не царапайте поверхность продукта предметом акулы.
5. Пожалуйста, не размещайте изделие во влажной среде, вместо этого его следует размещать в местах с хорошей вентиляцией.
6. Пожалуйста, не сжимайте продукт сильно и не оказывайте сильное давление на продукт.
7. Действуя в строгом соответствии с инструкциями, неправильные методы могут привести к потере имущества.

НЕИСПРАВНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Оборудования не работает	Отключение или нет; Вилка блока питания не вставлена в розетку. Кнопка массажа не нажата.	Используйте его при включении питания; правильно вставьте вилку в розетку; Включите питание.
Работа медленная и слабая	Низкое напряжение	Используйте регулятор; Регулировка давления.
Шум	Запуск нового продукта	После 20 часов работы шум уменьшится естественным образом.

<p>Стоп массировать внезапно в процессе работы</p>	<p>Адаптер питания подключен неправильно; Нажали кнопку на панели управления случайно; Запуск устройства защиты от перегрева.</p>	<p>Проверьте штепсельную вилку: снова нажмите кнопку питания и начните массаж; пожалуйста, отключите основной источник питания устройства и отсоедините шнур питания, чтобы машина могла отдохнуть в течение 20 минут и подождать, пока массажная подушка не остынет. Если проблема все еще существует, прекратите использование и свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов.</p>
--	---	---

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**