

# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Массажер для ног FEET RELAX White (с пультом управления) (SMF 006)**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>3</b>
<b>УПАКОВКА ВКЛЮЧЕНА .....</b>	<b>3</b>
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА .....</b>	<b>3</b>
<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА .....</b>	<b>4</b>
<b>РЕЖИМЫ МАССАЖА:.....</b>	<b>4</b>
<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .....</b>	<b>5</b>
<b>ВНИМАНИЕ .....</b>	<b>5</b>

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку массажера для ног Vodessy. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Пожалуйста, сохраните руководство пользователя после прочтения.

## УПАКОВКА ВКЛЮЧЕНА

- 1 x Массажер для ног
- 1 x Пульт дистанционного управления
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x Зарядное устройство

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


Модная и простая в управлении.

Многофункциональная машина со скребком, валиком, разминкой и давлением воздуха для ног и ступней.

Массаж для целых ступней.

Глубокий массаж в различных точках.



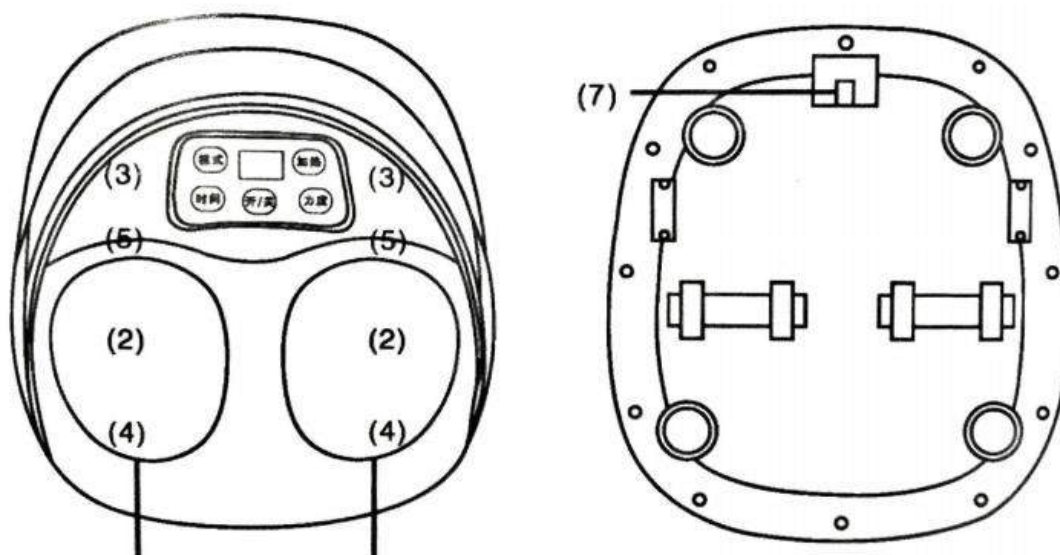


Моющиеся чехлы для ног.



- (1) Посередине: панель управления
- (2) Посередине внизу: массирующий лом и нагрев
- (3) Передняя часть днища: роликовый массажер
- (4) Задняя часть днища: перемешивающий массажер

- (5) Поверхность: давление воздуха для поверхности и пятки
- (6) Чехол для ног: моющийся чехол для ног
- (7) Соединительный штекер

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА

	<p>Обогрев. При включении обогрева -H1 означает, что обогрев включен, HF означает, что обогрев выключен.</p>
	<p>Сила. L1 означает низкий уровень прочности, L2 означает средний уровень силы, L3 означает режим высокого уровня прочности.</p>
	<p>В том числе 5 разных режимов массажа Power.</p>
	<p>Время включения / выключения</p>
	<p>от 5 минут до 15 минут. Добавление 1 минуты после нажатия кнопки времени один раз.</p>

1. Подготовьтесь перед использованием.
2. Нажмите кнопку нагрева, чтобы включить / выключить нагрев.
3. Нажмите кнопку силы для управления L1, L2 или L3.
4. Нажмите кнопку режима для управления P1, P2, P3, P4, P5.
5. Модель P1 и P2, включая давление воздуха и роликовый массажер

### РЕЖИМЫ МАССАЖА:

Роликовый массажер P1 работает с воздушной подушкой каждые 26 секунд и останавливается на 1 секунду.

P2 - роликовый массажер, работающий с воздушной подушкой каждые 14 с, и останавливается для 1S

P3-роликовый массажер, работающий каждые 26 с, и останавливается для 1S, воздушная подушка не работает  
P4-роликовый массажер не работает, работает только воздушная подушка,  
P5 - только нагрев.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Вы должны проконсультироваться с врачом, если:  
вы находитесь на терапии или чувствуете себя плохо, пациент с тяжелой болезнью сердца, пациент со злокачественной опухолью, рак, беременные женщины и менструальный период, порок развития позвоночника или аномальные изменения, остеопороз, диабет, недавно страдают от тромбов перенесли операцию, люди, у которых есть кардиостимулятор или медицинские имплантаты, люди с хрупкими или поврежденными костями, у вас температура (более 38 градусов).

## **ВНИМАНИЕ**

1. Шум будет намного ниже после 10 часов использования.
2. Пожалуйста, прекратите использование, если массажер не работает должным образом, и свяжитесь с нашей компанией.
3. Вытащите вилку и выключите питание, если массажер не работает. Подождите 15 секунд, подключите и снова включите. Если это по-прежнему не работает, свяжитесь с нашей компанией
4. Пожалуйста, не используйте в течение длительного времени (более 20 минут). Расширенное использование может быть опасным.
5. Детям запрещено пользоваться. Бесплатный сервис не принимается незаконной операцией.
6. Не засыпайте с помощью массажера.
7. При возникновении какого-либо дискомфорта выключите устройство.
8. Из-за риска поражения электрическим током не кладите мокрые ступни и / или ноги внутрь массажера. Не прикасайтесь к вилке или шнуру мокрыми руками.
9. Запрещается снимать винты. Не пытайтесь отремонтировать устройство, обратитесь к квалифицированному специалисту по техобслуживанию.
10. Никогда не работайте, если воздушные отверстия заблокированы. Не допускайте попадания в отверстия воздуха, волос и пыли.

11. Клиенты с термочувствительным чувством должны быть осторожны.
12. Пожалуйста, вытащите вилку, когда она перегрета или пахнет.
13. Не закрывайте слуховые аппараты при использовании.
14. Избегайте сырости и высокой температуры при хранении.
15. Не используйте избыточное давление.
16. Не допускается попадание воды в машину. В этом случае, пожалуйста, немедленно выключите.
17. Не допускается постоянное использование.
18. Пожалуйста, прекратите использование, если вы плохо себя чувствуете.
19. Не используйте, если шнур питания поврежден.
20. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Это может привести к перегреву устройства.
21. Никогда не используйте на открытом воздухе или во влажных или влажных помещениях, например, рядом с ванной или душем.
22. Никогда не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен. Отключайте шнур от розетки, когда он не используется.
23. Никогда не кладите одеяло или подушку на устройство. Это может привести к чрезмерному нагреву, что может привести к пожару или поражению электрическим током.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**