



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Система аппаратного похудения и  
моделирования фигуры Cavitone**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Техника безопасности .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Использование .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Массаж рук .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Массаж брюшной полости .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Уход за лицом .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Массаж ног .....</b>	<b>5</b>
<b>7. Массаж бедер .....</b>	<b>5</b>
<b>8. Массаж спины .....</b>	<b>6</b>
<b>9. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>6</b>
Товар надлежащего качества .....	7
Товар ненадлежащего качества .....	8

## 1. Техника безопасности



Не рекомендуется использовать устройство:


- Людям с поврежденной кожей;
- Страдающим кожными заболеваниями или эпилепсией;
- Стающим болезнью сердца, в особенности людям с кардиостимулятором;
- Больным раком;
- Людям с переломами конечностей;
- Беременным, кормящим женщинам. Девушкам во время менструации;
- Людям с болезнями желудка и язвами, высоким давлением и диабетом.

Придерживайтесь следующих советов:

- Прежде чем наносить специальный гель или масло необходимо очистить кожу;
- Чистите устройство только влажным полотенцем, иначе инструмент может выйти из строя;
- Устройство может непрерывно работать в течении 1 часа, после необходимо выключить устройство на 10 минут, после чего вы можете использовать его снова.

## 2. Об устройстве

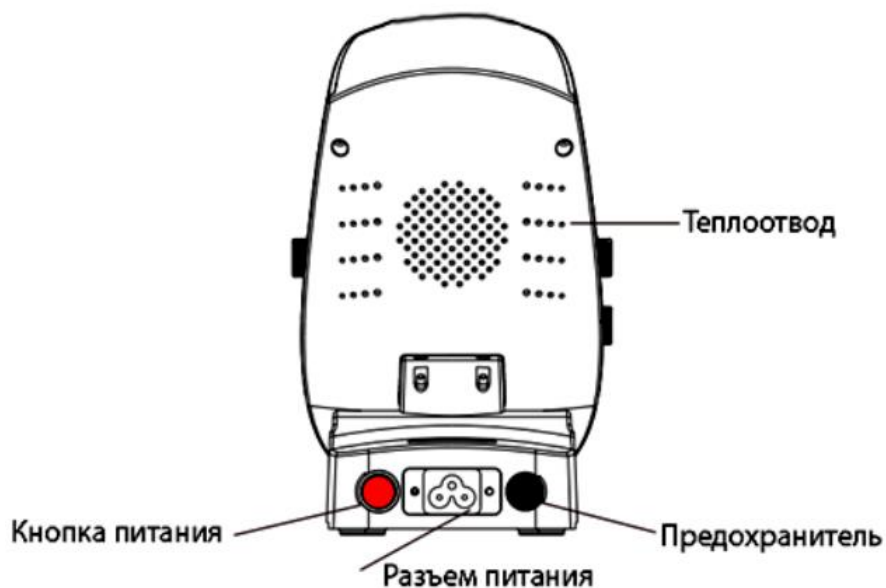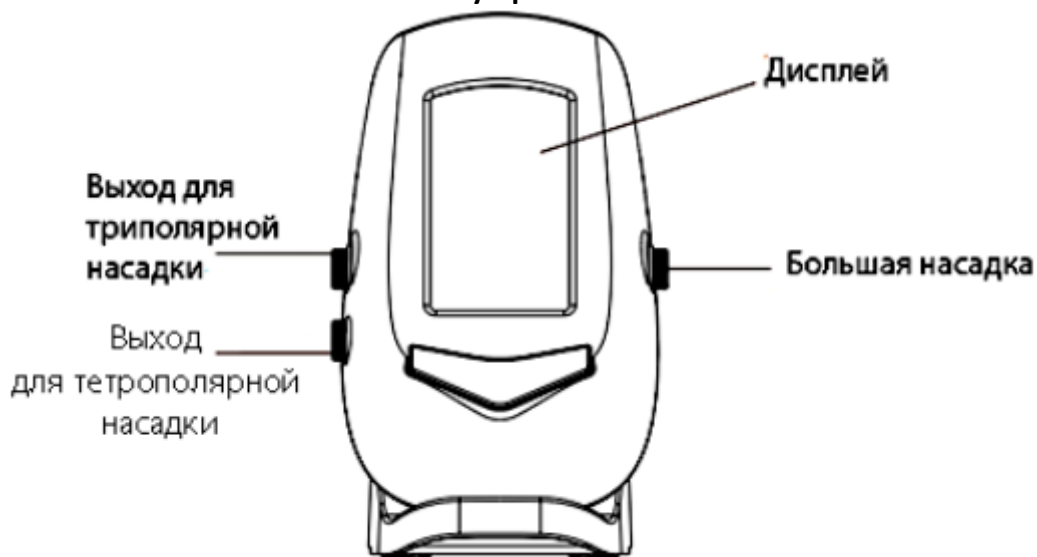

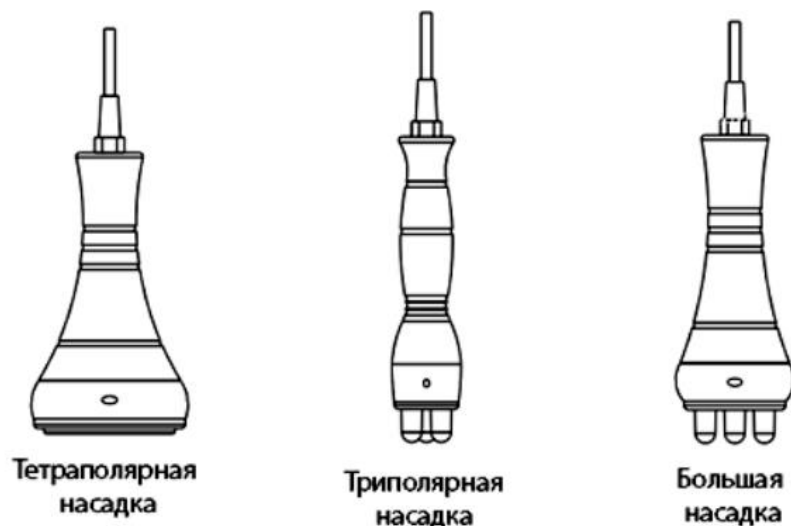

### 3. Использование

- Подключите устройство к источнику питания;
- Нажмите кнопку питания, включите устройство;
- Нажмите «Enter», войдите в меню, выберите нужную функцию, настройте время работы, интенсивность, затем нажмите «Start». После завершения процедуры нажмите «Exit», выключите питание.



1. Триполярная насадка:  
Укрепление кожи, сжигание жира, лимфодренаж, вывод токсинов, улучшение циркуляции крови;
2. Тетраполярная насадка:  
Насадка для лица, способствующая укреплению кожи, улучшению эластичности кожи, расщеплению жировых клеток, выводу токсинов.
3. Насадка с большой головкой:
4. Расслабление мышц, улучшение кожи ступней, бедер, спины, талии, живота.


### 4. Массаж рук

1. Проведите устройством от локтя до подмышки;
2. Круговыми движениями для стимуляции лимфоузлов;
3. Круговыми движениями против часовой стрелки или нажатием для сжигания жира;
4. Подтяжка кожи.




## 5. Массаж брюшной полости

Круговыми движениями по часовой стрелке. Помогает опорожнению кишечника.

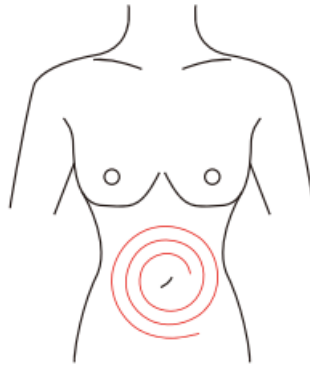


## 6. Уход за лицом

Проведите устройством по указанным на рисунке направлениям, чтобы разгладить морщины, подтянуть кожу.

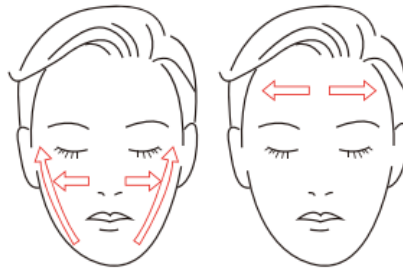


## 7. Массаж ног

1. От колен к паху для стимуляции лимфоузлов;
2. Круговыми вращениями против часовой стрелки для сжигания жира;
3. Вперед-назад для сжигания жира;
4. От голеностопа до колена, от колена до паха.

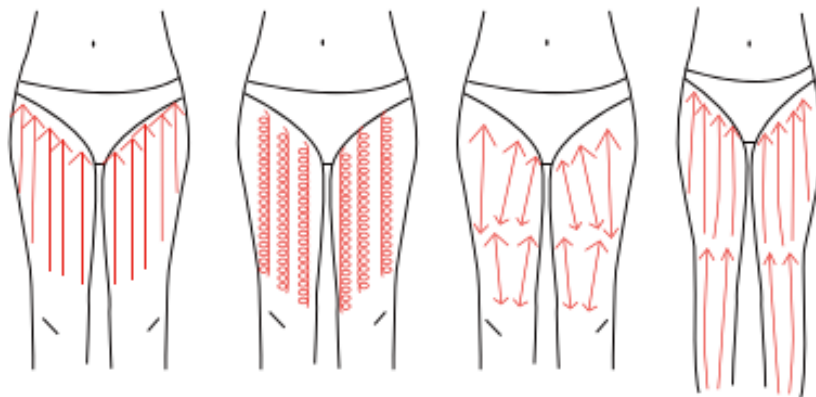


## 8. Массаж бедер

1. Вдоль лимфатической системы бедер;
2. Круговыми движениями вперед-назад.

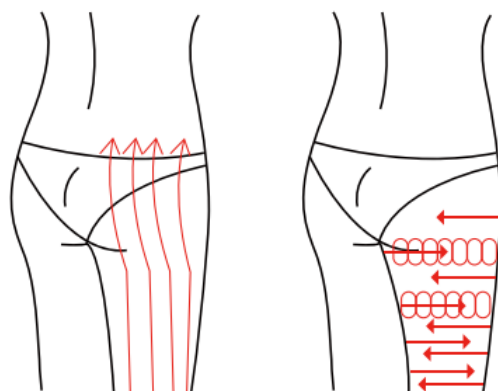

### 9. Массаж спины

1. Движениями вперед-назад, сверху-вниз;
2. Круговыми движениями для стимуляции лимфоузлов;
3. Круговыми движениями против часовой стрелки вверх-вниз для сжигания жира.

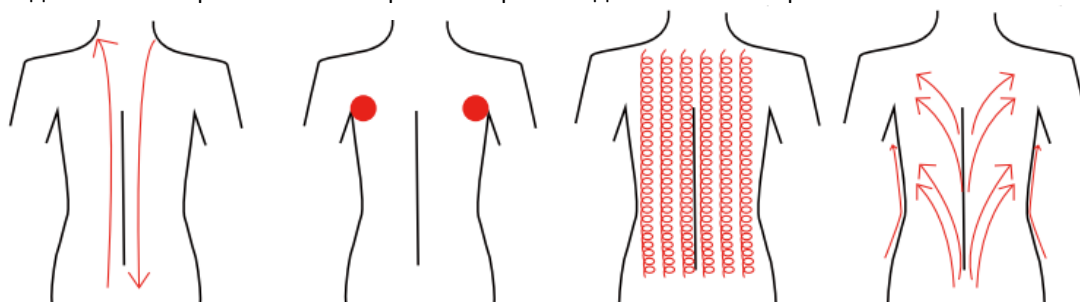

### 10. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;

- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**