



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Аппарат миостимуляции Incentivo B-400 (10 каналов, 20 электродов)



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Характеристики	3
Функции.....	4
Описание панели управления	4
Использование	5
Предостережения	6
Технические характеристики	6
Комплектация	7
Приложения	7
Правильная утилизация.....	13
Гарантийное обслуживание неисправного товара	14
Товар надлежащего качества.....	17
Товар ненадлежащего качества.....	17

Введение

Многие женщины обеспокоены увеличением жировых отложений в организме, увеличением объема талии и живота. Они испытывают дискомфорт из-за дряблой и обвисшей груди, рук или бедер. Лишний вес становится не только эстетической проблемой, но и причиной тревоги, поскольку избавиться от него непросто.

Согласно последним исследованиям, окружность талии у женщин не должна превышать 80 см, а у мужчин - 85 см. Если этот показатель превышен, возрастает риск таких заболеваний, как гипертония, гиперлипидемия, гипергликемия, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, жировая дистрофия печени, диабет, боли в пояснице и ногах и другие. Ожирение не только портит фигуру и влияет на повседневную жизнь, но и представляет угрозу для здоровья.

В настоящее время стремление к снижению веса и укреплению здоровья становится все более актуальным. Однако эффективное снижение веса требует комплексного подхода, сочетающего внутренние и внешние воздействия, что позволяет достичь стабильного результата.

Данный прибор объединяет передовые биотехнологии и интеллектуальные технологии. Он использует профессионально разработанные программы и уникальные комбинации, основанные на биологических и электронных принципах. Устройство сочетает в себе функции снижения веса, улучшения формы тела, укрепления груди, выведения токсинов и поддержания здоровья. В нем предусмотрено более 30 комбинированных программ и 10 каналов импульсного воздействия, предназначенных для коррекции общей и локальной полноты, подтяжки груди и ягодиц, устранения дряблости кожи и других проблем. Уникальное сочетание частот делает процесс ухода более эффективным и профессиональным.

Характеристики

1. 10 независимых каналов импульсного воздействия, предназначенных для локального и общего снижения веса, укрепления груди и улучшения формы тела.

2. 30 групп комбинированных программ, разработанных в зависимости от их функций:
 - **Функция 1 + PULSE SPEED 2:** Уменьшение жировых отложений, используется для дряблых и жировых участков.
 - **Функция 4 + PULSE SPEED 3:** Глубокое воздействие на жировые отложения, предназначено для крупных жировых участков.
 - **Функция 3 + PULSE SPEED 2:** Выведение токсинов через лимфу, улучшение кровообращения.
 - **Функция 2 + PULSE SPEED 1:** Устранение целлюлита.
 - **Функция 1 + PULSE SPEED 1:** Укрепление груди, повышение упругости и эластичности.
 - **Функция 2 + PULSE SPEED 3:** Увеличение груди, улучшение формы.
3. Автоматическая программа снижения веса (AUTO). При нажатии кнопки AUTO включаются различные программы в автоматическом режиме.
4. Возможность дополнения любой программы инфракрасным термолечением.

Функции

1. Устранение жировых отложений в области талии, бедер, живота и ягодиц, укрепление местных мышц для улучшения контуров тела.
2. Укрепление клеток тканей, ускорение метаболизма, выведение отходов и токсинов.
3. Улучшение кровообращения, стимуляция лимфатической системы.
4. Расслабление мышц, снятие болевых ощущений, устранение усталости.

Описание панели управления

1. Кнопка **Старт/Пауза**

2. Регулятор **Скорости** 3-4. Индикатор **Работы/Остановки** 5-7.
Отображение **Скорости** (3 режима)
3. Индикатор **Ошибки**
4. **Таймер** 10-11. Кнопки **Увеличения/Уменьшения времени**
5. Выбор **Программы** 13-16. Отображение выбранной **Функции** (1, 2, 3, 4)
6. **Автоматическая программа**
7. Индикатор **Авто**
8. Кнопка **Инфракрасного нагрева** 20-29. Регуляторы **Мин-Макс** 30-39.
Выходные порты

Использование

1. Подготовка:

- Обеспечить комфортную температуру в помещении.
- Провести гигиенические процедуры для обрабатываемых зон.
- Подключить электроды к выходным каналам устройства.
- Закрепить электроды на нужных участках тела, не затягивая слишком туго.
- Проверить правильность подключения.

2. Важные замечания:

- Интенсивность импульсов должна быть комфортной.
- Не использовать поврежденные электроды.
- Одна процедура не должна превышать 30 минут.
- Не применять агрессивные химические вещества для очистки электродов.
- При первом использовании возможны легкие отеки и напряжение мышц, которые исчезнут через несколько дней.

3. Выполнение процедуры:

- Установить напряжение в соответствии с местными стандартами (110V/220V).
- Включить прибор, настроить таймер (до 60 минут).
- Выбрать нужную программу.
- Установить скорость и интенсивность импульсов.
- Закрепить электроды на теле.
- Нажать **Старт**.
- Отрегулировать интенсивность каждого канала по ощущениям клиента.
- Включить инфракрасное нагревание, если требуется.

Предостережения

1. Не использовать прибор при наличии кардиостимулятора.
2. Не размещать электроды в области сердца.
3. Увеличивать интенсивность импульсов постепенно.
4. Пить больше воды после процедуры для выведения токсинов.
5. Избегать перегрева кожи при инфракрасном лечении.

Технические характеристики

- Напряжение: AC220V/50HZ
- Потребляемая мощность: <100W
- Количество выходов: 10
- Частота: 5~1000HZ
- Напряжение инфракрасного излучения: AC0~22V (регулируемое)

Комплектация

- 10 пар электродов с инфракрасным излучением
- Специальные электрические провода с инфракрасным излучением
- Электроды для груди
- 10 бинтов
- Широкий поясной бандаж
- Держатель
- Сетевой шнур

Приложения


Примечание: Контрольные рисунки прилагаются к выходам 1~10. Пожалуйста, размещайте проводящие пластины в соответствии с изображениями.

1. В каждой паре электродных пластин есть два листа. Пожалуйста, размещайте проводящие пластины в соответствии с изображениями, иначе это уменьшит ожидаемый эффект и вызовет дискомфорт у клиента.
2. Нанесите проводящий гель на проводящую пластину и очистите поверхность кожи перед размещением электрода, убедитесь, что лицевая сторона электрода плотно прилегает к коже.
3. Добавьте прокладки, если какая-либо часть тела недостаточно хорошо адаптируется к использованию гибкой пластины.

1. Воздействие на лимфатическую систему всего тела (20 минут)


Эффект: Улучшение лимфатической циркуляции.

Программа: Выберите Function1+PULSE SPEED2 для очищения тканей и вен, стимуляции лимфатической циркуляции, расслабления мышц и повышения их эластичности. Одновременно включите инфракрасное излучение (интенсивность: высокая).

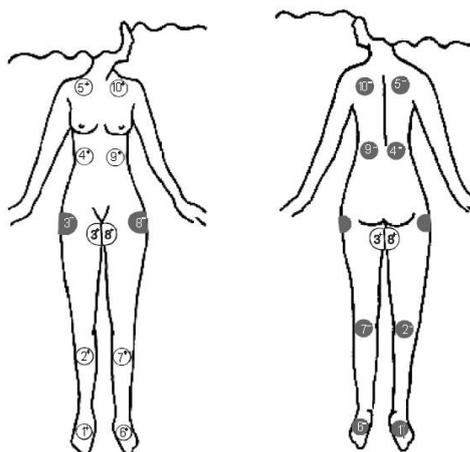

2. Воздействие на жировые отложения в области бедер и нижней части живота (30 минут)

Эффект: Дренаж жировой ткани и скопившегося жира в области бедер и нижней части живота. **Программа:** Выберите Function1+PULSE SPEED2 для разрушения жировых отложений (20 минут), затем Function4+PULSE SPEED3 для глубокой коррекции фигуры (10 минут). Одновременно включите инфракрасное излучение (интенсивность: высокая).

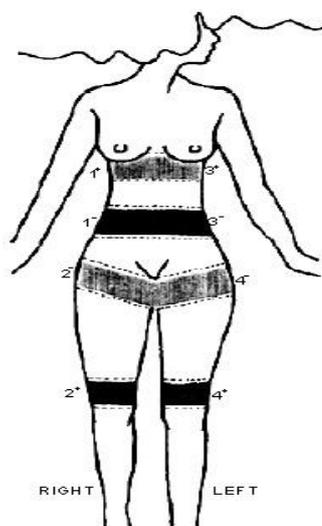


3. Воздействие для увеличение груди (20 минут)

Эффект: Стимуляция выработки женского гормона эстрогена и его транспорт в ткани груди.

Поза: Полулежа (с поднятием головы на 30 градусов) или с наклоном.

Программа: Выберите Function3+PULSE SPEED2.

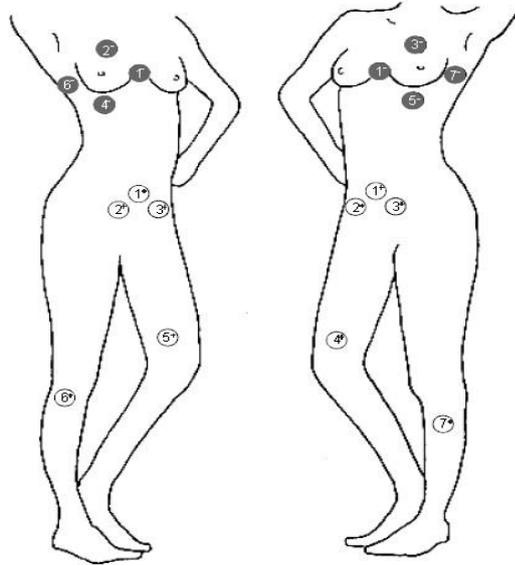


4. Воздействие для увеличение груди (20 минут)

Эффект: Усиление эффективного давления на ткань груди в капиллярных сосудах.

Поза: Полулежа (с поднятием головы на 30 градусов) или с наклоном.

Программа: Выберите Function1+PULSE SPEED1.

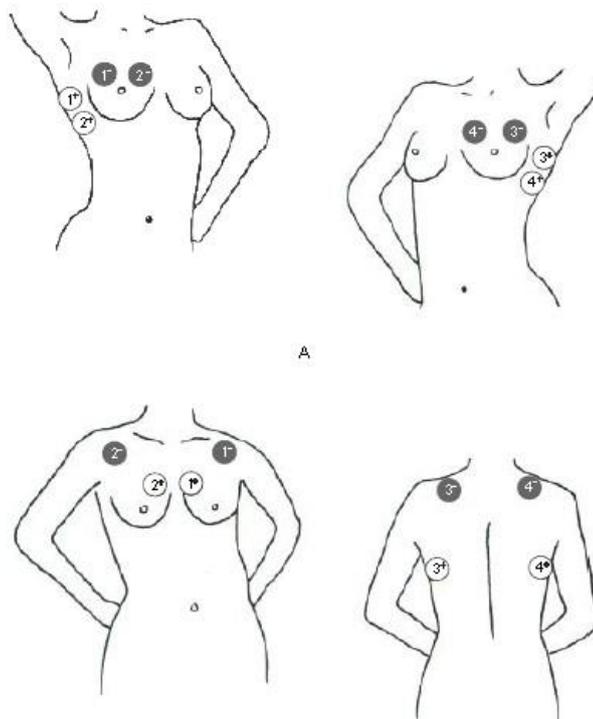


5. Воздействие на упругость груди (20 минут)

Эффект: Воздействие на участки тела с ослабленными или обвисшими кожными и мышечными тканями.

Поза: Полулежа (с поднятием головы на 30 градусов) или с наклоном.

Программа: Выберите Function2+PULSE SPEED3.

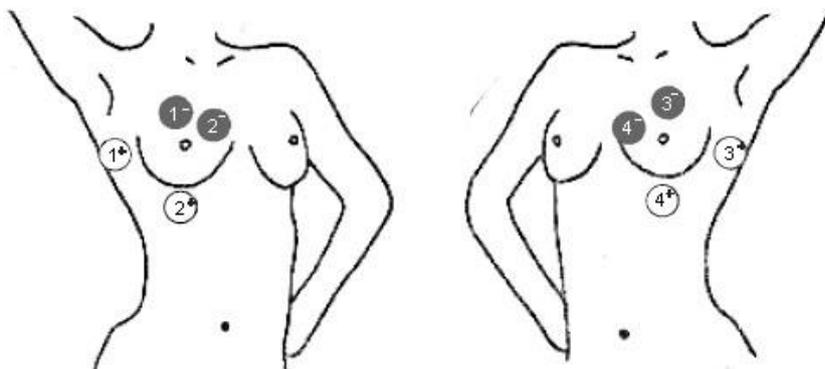


6. Воздействие на область талии и живота (45 минут)

Эффект: Усиление амплитуды мышечных сокращений для интенсивного воздействия на проблемные участки, создание подтянутой талии и плоского живота.

Поза: Полулежа (с поднятием головы на 30 градусов) или с наклоном.

Программа: Выберите автоматическую программу коррекции фигуры (36 минут), затем Function4+PULSE SPEED1 (10 минут). Одновременно включите инфракрасное излучение (интенсивность: высокая).

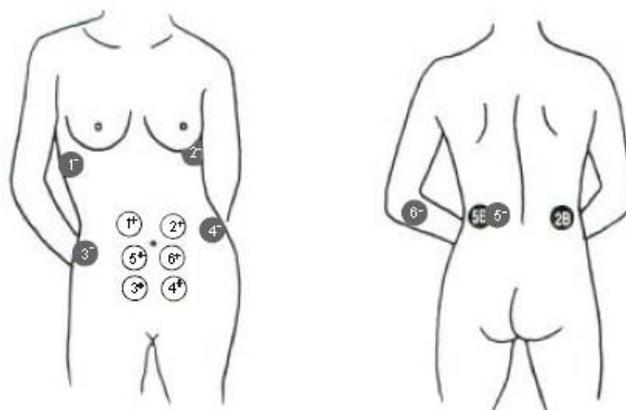


7. Воздействие на ягодицы (46 минут)

Эффект: Усиление мышечных сокращений для подтяжки ягодичных мышц и симметричного их развития.

Поза: Лежа на животе.

Программа: Выберите автоматическую программу коррекции фигуры (36 минут), затем Function4+PULSE SPEED3 (10 минут). Одновременно включите инфракрасное излучение (интенсивность: средняя).

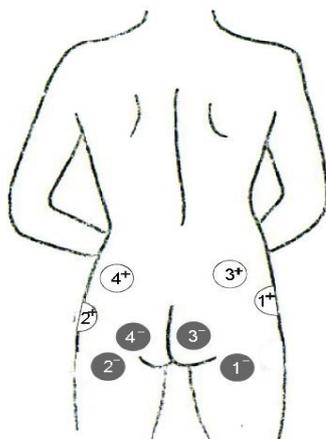


8. Воздействие на бедра (46 минут)

Эффект:

1. Сжигание жира в передней части бедра.
2. Сжигание жира в задней части бедра.
3. Укрепление мышц передней части бедра.

Поза: Полулежа (с поднятием головы на 30 градусов) или с наклоном.


Программа: Выберите автоматическую программу коррекции фигуры (36 минут), затем Function4+PULSE SPEED3 (10 минут). Одновременно включите инфракрасное излучение (интенсивность: средняя).

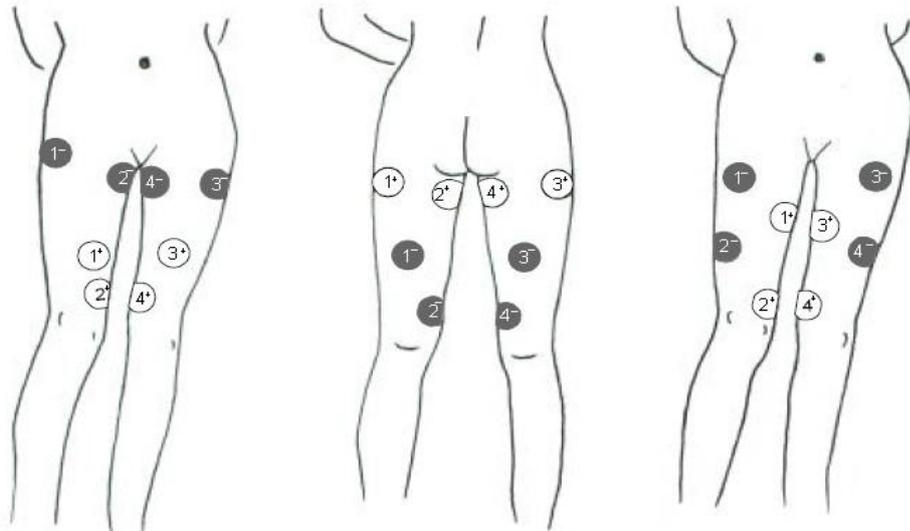

9. Воздействие на икры (40 минут)

Эффект:

1. Сжигание жира в области икр.
2. Укрепление мышц икр.
3. **Поза:** Сидя прямо, чтобы икра сокращалась от колена к лодыжке, или полулежа (с поднятием головы на 30 градусов), чтобы икра поднималась.
4. **Программа:**
 - Выберите Function3+PULSE SPEED2 (20 минут) для подготовки к работе с бедрами.
 - Затем Function3+PULSE SPEED3 (20 минут). Одновременно включите инфракрасное излучение (интенсивность: средняя).

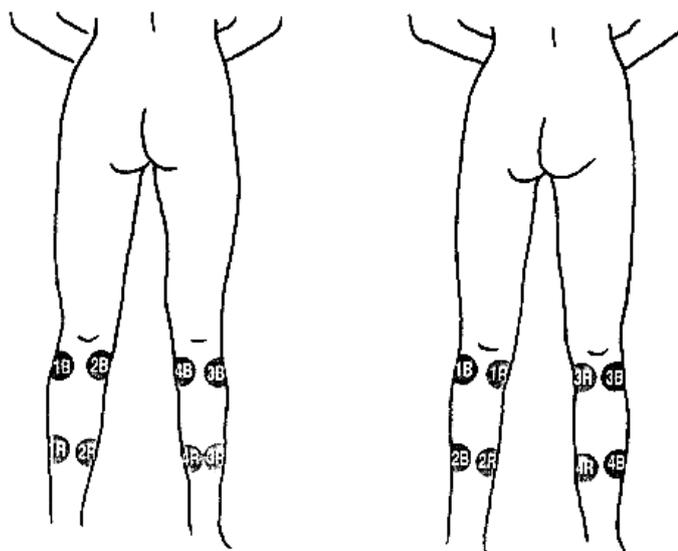

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66

- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!