



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Аппарат миостимуляции Incentivo В-400 (10 каналов, 20 электродов)

Характеристики

- 10 независимых каналов импульсного воздействия, предназначенных для локального и общего снижения веса, укрепления груди и улучшения формы тела.
- 30 групп комбинированных программ, разработанных в зависимости от их функций:
 - **Функция 1 + PULSE SPEED 2:** Уменьшение жировых отложений, используется для дряблых и жировых участков.
 - **Функция 4 + PULSE SPEED 3:** Глубокое воздействие на жировые отложения, предназначено для крупных жировых участков.
 - **Функция 3 + PULSE SPEED 2:** Выведение токсинов через лимфу, улучшение кровообращения.
 - **Функция 2 + PULSE SPEED 1:** Устранение целлюлита.
 - **Функция 1 + PULSE SPEED 1:** Укрепление груди, повышение упругости и эластичности.
 - **Функция 2 + PULSE SPEED 3:** Увеличение груди, улучшение формы.
- Автоматическая программа снижения веса (AUTO). При нажатии кнопки AUTO включаются различные программы в автоматическом режиме.
- Возможность дополнения любой программы инфракрасным термолечением.

Функции

- Устранение жировых отложений в области талии, бедер, живота и ягодиц, укрепление местных мышц для улучшения контуров тела.
- Укрепление клеток тканей, ускорение метаболизма, выведение отходов и токсинов.
- Улучшение кровообращения, стимуляция лимфатической системы.
- Расслабление мышц, снятие болевых ощущений, устранение усталости.

Описание панели управления

- Кнопка **Старт/Пауза**
- Регулятор **Скорости** 3-4. Индикатор **Работы/Остановки** 5-7. Отображение **Скорости** (3 режима)
- Индикатор **Ошибки**
- Таймер** 10-11. Кнопки **Увеличения/Уменьшения времени**
- Выбор **Программы** 13-16. Отображение выбранной **Функции** (1, 2, 3, 4)

- Количество выходов: 10
- Частота: 5~1000HZ
- Напряжение инфракрасного излучения: AC0~22V (регулируемое)

Комплектация

- 10 пар электродов с инфракрасным излучением
- Специальные электрические провода с инфракрасным излучением
- Электроды для груди
- 10 бинтов
- Широкий поясной бандаж
- Держатель
- Сетевой шнур

Приложения


Примечание: Контрольные рисунки прилагаются к выходам 1~10. Пожалуйста, размещайте проводящие пластины в соответствии с изображениями.

1. В каждой паре электродных пластин есть два листа. Пожалуйста, размещайте проводящие пластины в соответствии с изображениями, иначе это уменьшит ожидаемый эффект и вызовет дискомфорт у клиента.
2. Нанесите проводящий гель на проводящую пластину и очистите поверхность кожи перед размещением электрода, убедитесь, что лицевая сторона электрода плотно прилегает к коже.
3. Добавьте прокладки, если какая-либо часть тела недостаточно хорошо адаптируется к использованию гибкой пластины.

1. Воздействие на лимфатическую систему всего тела (20 минут)

Эффект: Улучшение лимфатической циркуляции.

Программа: Выберите Function1+PULSE SPEED2 для очищения тканей и вен, стимуляции лимфатической циркуляции, расслабления мышц и повышения их эластичности. Одновременно включите инфракрасное излучение (интенсивность: высокая).

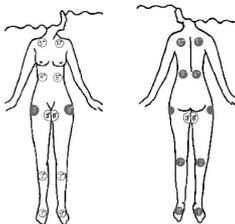

6. **Автоматическая программа**
7. Индикатор **Авто**
8. Кнопка **Инфракрасного нагрева** 20-29. Регуляторы **Мин-Макс** 30-39. **Выходные порты**

Использование

1. Подготовка:
 - Обеспечить комфортную температуру в помещении.
 - Провести гигиенические процедуры для обрабатываемых зон.
 - Подключить электроды к выходным каналам устройства.
 - Закрепить электроды на нужных участках тела, не затягивая слишком туго.
 - Проверить правильность подключения.
2. Важные замечания:
 - Интенсивность импульсов должна быть комфортной.
 - Не использовать поврежденные электроды.
 - Одна процедура не должна превышать 30 минут.
 - Не применять агрессивные химические вещества для очистки электродов.
 - При первом использовании возможны легкие отеки и напряжение мышц, которые исчезнут через несколько дней.
3. Выполнение процедуры:
 - Установить напряжение в соответствии с местными стандартами (110V/220V).
 - Включить прибор, настроить таймер (до 60 минут).
 - Выбрать нужную программу.
 - Установить скорость и интенсивность импульсов.
 - Закрепить электроды на теле.
 - Нажать **Старт**.
 - Отрегулировать интенсивность каждого канала по ощущениям клиента.
 - Включить инфракрасное нагревание, если требуется.

Предостережения

1. Не использовать прибор при наличии кардиостимулятора.
2. Не размещать электроды в области сердца.
3. Увеличивать интенсивность импульсов постепенно.
4. Пить больше воды после процедуры для выведения токсинов.
5. Избегать перегрева кожи при инфракрасном лечении.


Технические характеристики

- Напряжение: AC220V/50HZ
- Потребляемая мощность: <100W

2

2. Воздействие на жировые отложения в области бедер и нижней части живота (30 минут)


Эффект: Дренаж жировой ткани и скопившегося жира в области бедер и нижней части живота. **Программа:** Выберите Function1+PULSE SPEED2 для разрушения жировых отложений (20 минут), затем Function4+PULSE SPEED3 для глубокой коррекции фигуры (10 минут). Одновременно включите инфракрасное излучение (интенсивность: высокая).

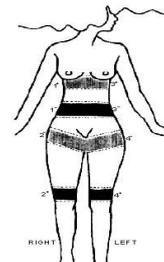

3. Воздействие для увеличение груди (20 минут)

Эффект: Стимуляция выработки женского гормона эстрогена и его транспорт в ткани груди.


Поза: Полулежа (с поднятием головы на 30 градусов) или с наклоном. **Программа:** Выберите Function3+PULSE SPEED2.

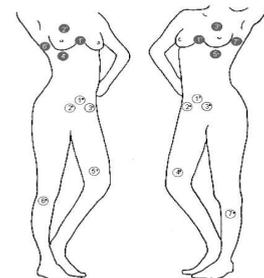

4. Воздействие для увеличение груди (20 минут)

Эффект: Усиление эффективного давления на ткань груди в капиллярных сосудах.


Поза: Полулежа (с поднятием головы на 30 градусов) или с наклоном. **Программа:** Выберите Function1+PULSE SPEED1.

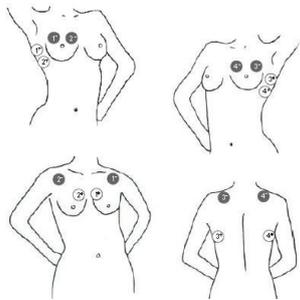

5. Воздействие на упругость груди (20 минут)

Эффект: Воздействие на участки тела с ослабленными или обвисшими кожными и мышечными тканями.


Поза: Полулежа (с поднятием головы на 30 градусов) или с наклоном. **Программа:** Выберите Function2+PULSE SPEED3.

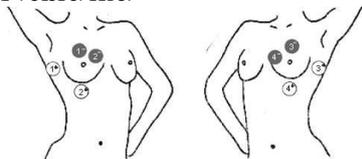

6. Воздействие на область талии и живота (45 минут)

Эффект: Усиление амплитуды мышечных сокращений для интенсивного воздействия на проблемные участки, создание подтянутой талии и плоского живота.

Поза: Полулежа (с поднятием головы на 30 градусов) или с наклоном. **Программа:** Выберите автоматическую программу коррекции фигуры (36 минут), затем Function4+PULSE SPEED1 (10 минут). Одновременно включите инфракрасное излучение (интенсивность: высокая).

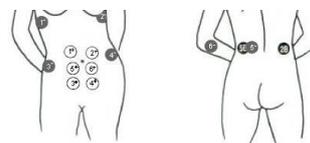


7. Воздействие на ягодицы (46 минут)

Эффект: Усиление мышечных сокращений для подтяжки ягодичных мышц и симметричного их развития.

Поза: Лежа на животе.

Программа: Выберите автоматическую программу коррекции фигуры (36 минут), затем Function4+PULSE SPEED3 (10 минут). Одновременно включите инфракрасное излучение (интенсивность: средняя).

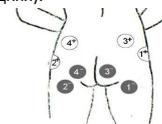


8. Воздействие на бедра (46 минут)

Эффект:

1. Сжигание жира в передней части бедра.
2. Сжигание жира в задней части бедра.
3. Укрепление мышц передней части бедра.

Поза: Полулежа (с поднятием головы на 30 градусов) или с наклоном.

Программа: Выберите автоматическую программу коррекции фигуры (36 минут), затем Function4+PULSE SPEED3 (10 минут). Одновременно включите инфракрасное излучение (интенсивность: средняя).

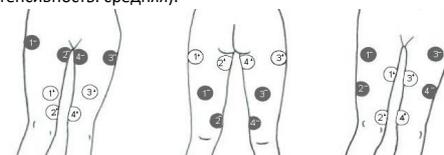

9. Воздействие на икры (40 минут)

Эффект:

1. Сжигание жира в области икр.
2. Укрепление мышц икр.


5

6

3. **Поза:** Сидя прямо, чтобы икра сокращалась от колена к лодыжке, или полулежа (с поднятием головы на 30 градусов), чтобы икра поднималась.

4. Программа:

- Выберите Function3+PULSE SPEED2 (20 минут) для подготовки к работе с бедрами.
- Затем Function3+PULSE SPEED3 (20 минут). Одновременно включите инфракрасное излучение (интенсивность: средняя).

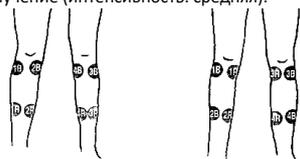

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!

7