

**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Перкуссионный массажер Mini SK-  
328, зеленый**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Описание устройства .....</b>	<b>3</b>
1.1 Внешний вид массажера .....	3
1.2 Технические характеристики .....	4
<b>2. Использование массажера.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Зарядка устройства .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Показания к применению .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Противопоказания.....</b>	<b>6</b>
<b>6. Комплектация .....</b>	<b>6</b>


## 1. Описание устройства

Mini SK-328 —перкуSSIONный вибромассажер, который помогает снять мышечное напряжение, ускорить восстановление после травм. Устройство практически бесшумно. Проработка мышц производится на глубине 16-32 мм.

### 1.1 Внешний вид массажера



Четыре сменные массажные насадки помогают более эффективно массировать мышцы.

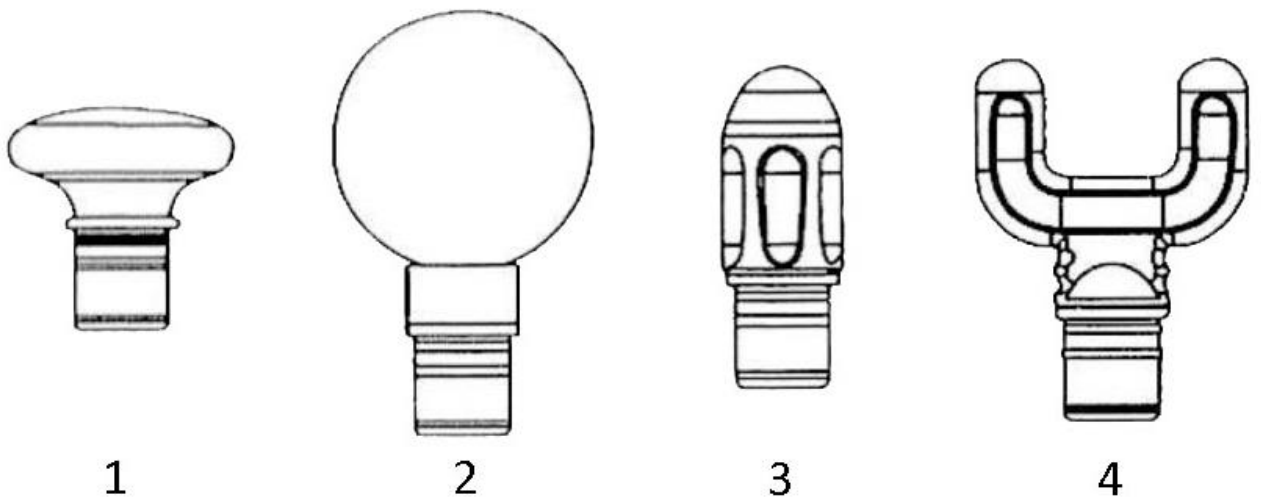

- 1) Плоская массажная насадка подходит для массажа и формирования различных групп мышц.
- 2) Круглая массажная головка подходит для массажа всех мышц, в том числе ладоней, ступней и так далее.

- 3) Массажная насадка цилиндрической формы подходит для проработки глубокого слоя мышц.
- 4) У-образная массажная головка подходит для массажа шеи, позвоночника и ахиллова сухожилия.

### 1.2 Технические характеристики

- Напряжение: 8,4 В;
- Мощность: 2 А;
- Параметры входящего тока: 5В, 2 А;
- Максимальная скорость: 3200 об/мин;
- Ёмкость батареи: 2000 мАч;

## 2. Использование массажера



- **Включение и выключение массажера**

Нажмите и удерживайте кнопку Вкл / Выкл в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить устройство.

- **Регулировка скорости**

Массажер запускается на первой скорости. Чтобы увеличить скорость, нажмите кнопку питания. Максимальная скорость работы – четвертая. На четвертой скорости нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы переключить массажер на первую скорость.

- **Смена массажной насадки**

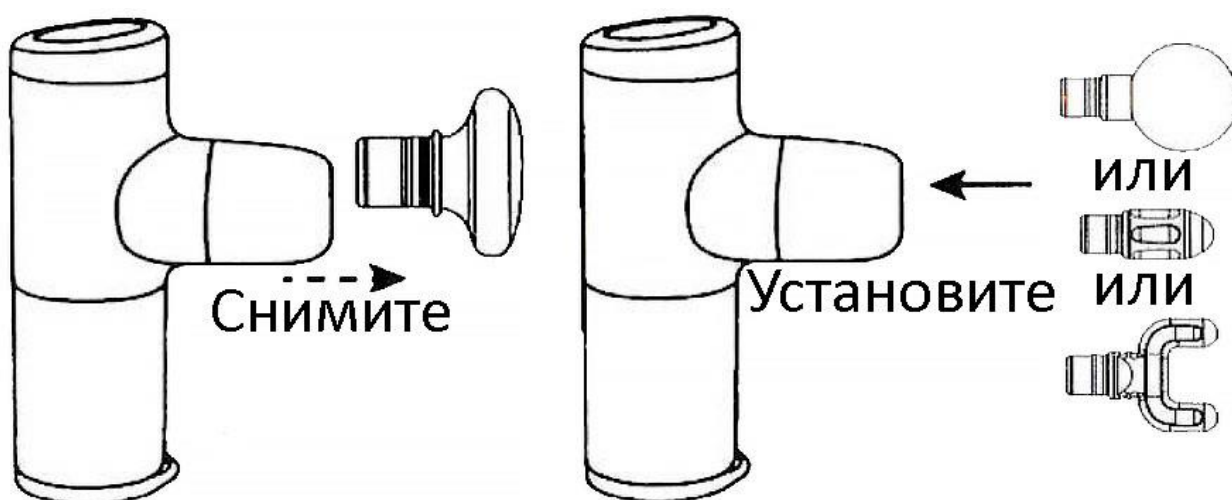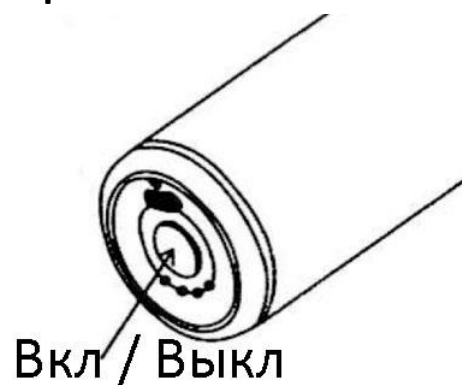

- **Индикаторы**
- Четыре последовательных индикатора на нижней стороне массажера показывают скорость на которой работает устройство. Один индикатор – первая скорость, Два индикатора – вторая скорость. Три светящихся индикатора указывают на работу на третьей скорости. Четыре – четвертая скорость.
- Верхний индикатор показывает статус устройства. Он светит ровным зеленым светом, когда устройство включено. Красным, когда массажер заряжается.



### 3. Зарядка устройства

Перед первым использованием массажера, полностью зарядите его. Для этого, подключите провод Type-C в соответствующий разъем на массажере. Подключите кабель к адаптеру питания с USB-разъемом, например, от мобильного телефона. Важно, чтобы адаптер имел маркировку 5 В, 2 А.

Индикатор будет гореть красным во время зарядки и зеленым, когда устройство полностью заряжено. Время зарядки составляет от 4 до 11, 5 часов.

Если заряд массажера снизился до 10 %, индикатор начнёт мигать красным светом. Зарядите устройство как можно скорее.

#### **Внимание**

Не используйте массажер во время зарядки.

Чтобы продлить срок работы батареи, заряжайте массажер сразу после появления сигнала низкого заряда батареи.

### 4. Показания к применению

- Облегчить боль и спазм из-за ушиба, растяжения и напряжения мышц;
- Уменьшить отек;
- Массаж рыхлой и утолщенной соединительной ткани или фасции;
- Уменьшить накопление молочной кислоты в мышцах;
- Повысить подвижности суставов;
- Устранить мышечную усталость;

## 5. Противопоказания

Не используйте массажер, если у вас есть хотя бы одно из нижеследующих противопоказаний:

- Аневризма, кровотечение, приём антикоагулянтов;
- Болезни сердца, установленный кардиостимулятор или ритмоводитель;
- Беременность, рак;
- Устройство запрещено использовать в пределах 8 сантиметров от места проведения операции в течение 90 дней после операции.
- Устройство запрещено использовать на чувствительной области головы, лица, шейных позвонков, по позвоночнику. В местах с меньшим покрытием костей мышцами, например, по выпирающей части большеберцовой кости, тыльной стороне стопы, тыльной стороне кисти и т. д.

## 6. Комплектация

- Инструкция по использованию;
- Кабель Type-C;
- Корпус массажера;
- Плоская массажная насадка;
- Круглая массажная насадка;
- Цилиндрическая массажная насадка;
- У-образная массажная насадка;

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**