



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Лазерный эпилятор IPL для
домашнего использования SkinGlam
RED210**




СОДЕРЖАНИЕ

1. Обзор устройства	3
1.1 Корпус.....	3
1.2 Дисплей.....	3
2. Ограничение использования	4
3. Использование.....	4
3.1 Перед применением	4
3.2 Применение	4
3.3 Режимы	5
3.4 Использование в терапевтических целях.....	5
3.5 После применения.....	5
4. Уход и обслуживание	5
5. Часто задаваемые вопросы.....	6
6. Меры предосторожности	6
7. Противопоказания.....	7


1. Обзор устройства

1.1 Корпус

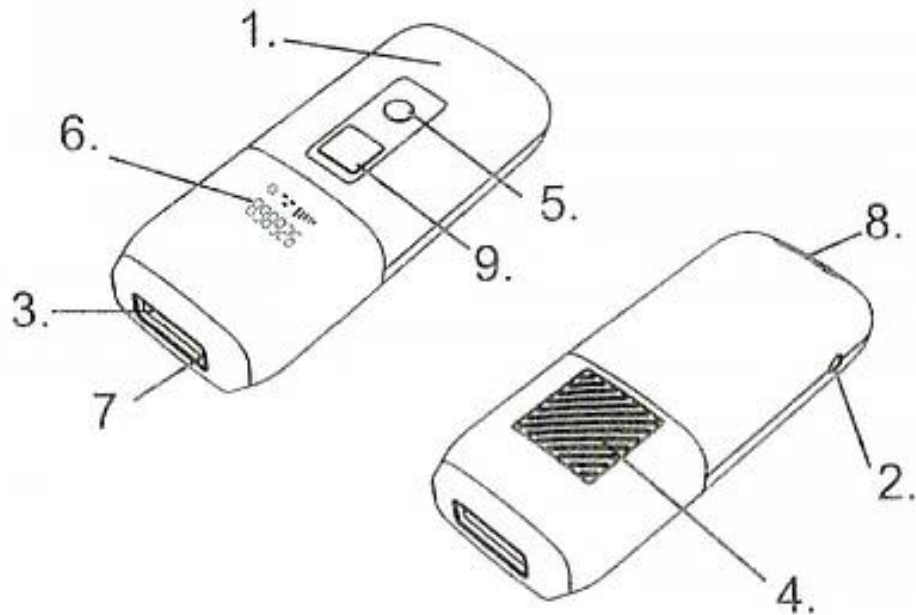

1. Лазерный эпилятор;
2. Порт для зарядного устройства;
3. Контактная поверхность;
4. Вентиляционное отверстие;
5. Кнопка Вкл / Выкл;
6. Экран устройства;
7. Фильтр;
8. Вентиляционное отверстие;
9. Кнопка Вспышка.

1.2 Дисплей

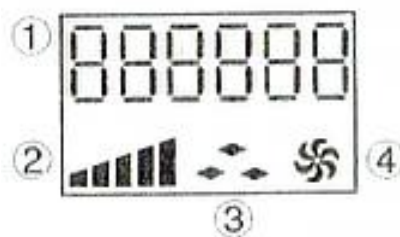

1. Количество вспышек в запасе;
2. Уровень воздействия;
3. Режим автоматической вспышки;
4. Вентилятор.

2. Ограничение использования

Обратите внимание на таблицу ниже. Использование данного эпилятора подходит не всем фототипам.

Цвет кожи			Светло-оливковая	Темно-оливковая	Темно-коричневая	Темная
	Оч. светлая	Светлая			⊗	⊗

3. Использование

3.1 Перед применением

1. Сбрейте волосы в местах, где будет применяться лазерный эпилятор. Если длина волос не превышает двух миллиметров, бритьё необязательно.
2. Убедитесь, что на коже нет волос, она сухая и чистая. Запрещено наносить какие-либо косметические средства перед использованием эпилятора.

3.2 Применение

1. Очистите поверхность и фильтр устройства мягкой тканью перед использованием.
2. Подключите адаптер питания к аппарату. При нормальном подключении должен замигать красный индикатор.
3. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл / Выкл, пока не начнет светиться подсветка.
4. Приложите устройство перпендикулярно к коже. Убедитесь, что световое окно полностью соприкасается с кожей.
5. Если экран меняет состояние с мигающего на постоянно светящийся, значит эпилятор электрифицирован.
6. После того как вы приложили эпилятор к коже, аккуратно нажмите кнопку Вспышка. Нажмите и удерживайте кнопку Вспышка в течение 2 секунд, чтобы включить режим автоматической вспышки.
7. После вспышки переместите эпилятор на другой участок кожи.
8. Эпилируйте участки как можно ближе друг к другу, но так, чтобы они не перекрывали друг друга.

3.3 Режимы

В данном устройстве представлено два режима вспышки:

- 1) Срабатывание после нажатия (одна вспышка). Данный режим подходит больше для маленьких и труднодоступных областей, например, колени и подмышечные впадины. Для применения вспышки просто нажмите соответствующую кнопку.
- 2) Автоматическая вспышка подходит больше для легкодоступных, открытых участков кожи, например, ног или рук. Просто сдвигайте эпилятор на другой участок кожи после каждой вспышки.

3.4 Использование в терапевтических целях

1-4 неделя	5-6 неделя	7-8 неделя	Больше 8 недель
3 раза в неделю	2 раза в неделю	1 раз в неделю	1 раз в 2 недели

Первый курс депиляции означает 3-х кратное облучение. Пожалуйста, не светите постоянно на одном и том же месте в течение трех раз, вы можете вызвать ожог. Чем выше уровень облучения, тем лучше эффект.

Рекомендация следующая: используйте уровень от 2 до 4 при первом использовании. Затем выберите 5 уровень. Во время курса проверяйте скорость роста волос. Эффект различается на разных частях тела.

3.5 После применения

1. Кожа может быть слегка воспаленной, чувствительной или теплой. Эти реакции совершенно безвредны и скоро исчезнут.
2. Вы можете спокойно наносить лосьон, крем, дезодорант, увлажняющий крем или косметику на обработанный участок. Если после процедуры появилось покалывание или покраснение, подождите, пока эти ощущения исчезнут, прежде чем наносить любой другой продукт на кожу.

4. Уход и обслуживание

1. После использования выключите питание и отключите эпилятор от сети, чтобы эпилятор охладился.
2. Очистите слегка влажной тканью фильтр и контактную поверхность от загрязнений.

3. Храните эпилятор в незапыленном месте с температурой от 0° до 60 ° Цельсия.

5. Часто задаваемые вопросы

Когда снижается уровень роста волос?

Клинически подтвержденные результаты показывают, что замедление роста волос до 90% проявляется уже после 4-7 применения. 98% клиентов удовлетворены состоянием своей кожи. Длина волны более 510нм может привести к повреждению фолликул и ингибировать рост волос. Таким образом, вы можете отказаться от удаления нежелательных волос.

Когда будет виден результат?

После 4-5 использований большинство пользователей отмечают визуальное уменьшение количества волос, что сравнимо по эффективности с лазерными процедурами, проводимыми профессионалами.

Где можно использовать данный эпилятор?

1. Вы можете удалить волосы на губах, подбородке, бакенбардах, подмышках, руках, ногах, животе, бикини и интимных местах.
2. Уровень 1 рекомендуется использовать для первого применения. После этого вы можете выбрать более высокий уровень интенсивности, который вы сможете стерпеть.

Кто может использовать данный эпилятор?

Пожалуйста, не используйте этот инструмент на темной или недавно загорелой коже.

Этот косметический инструмент предназначен для светлых тонов кожи и волос от коричневого до черного.

Не рекомендуется удалять белые, серые, рыжие и волосы цвета блонд.

6. Меры предосторожности

1. Не выдергивайте шнур питания из розетки, пока он не выключен. Эпилятор не нуждается в зарядке и готов к работе сразу после включения.
2. Используйте увлажняющий крем или гель алое-вера, чтобы успокоить кожу после эпиляции.

3. Избегайте воздействия ультрафиолетом на кожу в течение 24 часов после облучения.

7. Противопоказания

- Не подходит для беременных и кормящих женщин, а также для людей во время менструального цикла;
- Не подходит для людей с рубцовым диатезом;
- Не подходит для людей с фотосенсибилизацией или диабетом в анамнезе;
- Не подходит для людей, которые депилировали кожу другими методами в течение последних 6 недель и использовали средства для отбеливания кожи или продукты с витамином А в течение последней недели;
- Не подходит для лиц, которые принимали эфирные масла непосредственно перед эпиляцией;
- Не подходит для лиц, принимавших аспирин и иммунодепрессанты;
- Не подходит для людей, которые в течение последних 2 недель подвергались воздействию сильного солнечного света.
- Не подходит для чувствительных участков, таких как слизистая оболочка, например, верхнее веко, губа, соски, влагалище и т. д.;
- Не подходит для людей с гирсутизмом и другими заболеваниями, которые могут вызвать осложнения.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**