

# MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Массажный миостимулятор EMS 36,  
36 режимов



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение.....</b>	<b>3</b>
<b>Независимые каналы А / В .....</b>	<b>3</b>
<b>Перезаряжаемый литиевый аккумулятор .....</b>	<b>3</b>
<b>Расслабления в любое время, в любом месте .....</b>	<b>3</b>
<b>Использовании .....</b>	<b>4</b>
<b>Меры предосторожностей.....</b>	<b>4</b>
<b>Уход и обслуживание .....</b>	<b>6</b>
<b>Знакомство с устройством.....</b>	<b>6</b>
<b>Устранение неисправностей .....</b>	<b>7</b>
<b>Правильная утилизация .....</b>	<b>8</b>
<b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>8</b>
Товар надлежащего качества .....	11
Товар ненадлежащего качества .....	11

## **Введение**

Многофункциональный массажер имеет 36 запрограммированных режимов массажа для облегчения боли и расслабления мышц, предоставляя вам возможность поколачивания, разминания, нажатия пальцами и другие возможности, помогающие снять боль и усталость, вызванные шеей, плечами, спиной, лодыжками, запястьями и локтями, артритом, менструальными болями и спортивными травмами.

## **Независимые каналы А / В**

Наш продукт может устанавливать различные режимы и интенсивности для канала А и канала В. Вы можете поделиться им с семьей и друзьями. Имеется 20 уровней интенсивности. Обратите внимание, что на каждые 2 уровня изменения интенсивности полоса на экране будет увеличиваться или уменьшаться на единицу.

## **Перезаряжаемый литиевый аккумулятор**

До 20 часов непрерывной работы. Его можно подключить к настенному зарядному устройству, мобильному источнику питания или USB-порту ноутбука для зарядки. (Настенное зарядное устройство (5 В постоянного тока/1 А) **НЕ** входит в комплект). Он имеет индикатор заряды батареи, чтобы напомнить вам о необходимости зарядки вовремя. Не нужно беспокоиться о перерывах во время использования.

## **Расслабления в любое время, в любом месте**

Компактный размер, который можно использовать в офисе, машине или путешествии. Устройство EMS может уменьшить боль и мышечные спазмы в спине, коленях, плечах, лодыжках, запястьях и локтях, что делает его самым мощным оружием против хронической боли. Массажный миостимулятор – это идеальный выбор для неинвазивного и немедикаментозного обезболивания.

## Использовании

1. Подключите гелевые накладки к проводу, защелкнув их, затем снимите защитную пленку.

2. Поместите накладки на место, которое вам нужно простимулировать, затем подключите их к одному из портов устройства.

\* Убедитесь, что на выбранном вами участке кожи нет ожогов или травм при использовании, и следите за тем, чтобы кожа была чистой, без масла, косметики или других лосьонов.

3. Включите устройство, сдвинув переключатель Вкл./Выкл. на верхней части устройства, после чего устройство активируется.

4. Нажмите кнопку «М», чтобы выбрать между различными режимами, затем нажмите центральную кнопку, чтобы выбрать волны в пределах этого выбора.

\* Центральную кнопку также можно использовать в качестве кнопки блокировки. Нажмите и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы заблокировать экран, и еще 3 секунды, чтобы разблокировать миостимулятор.

5. После выбора режима постепенно увеличивайте интенсивность, нажимая кнопку «+». Уменьшайте ее, нажимая кнопку «-».

При нажатии «+» или «-» один раз» интенсивность увеличится ИЛИ уменьшится на 1 уровень, полоса на экране не изменится; при нажатии «+» ИЛИ дважды интенсивность увеличится ИЛИ уменьшится на 2 уровня, а полоса на экране увеличится на 1.

\* Помните, что при выборе любого режима интенсивность по умолчанию будет минимальной.

6. Нажмите кнопку «Т», чтобы выбрать время работы режима. Увеличивайте на 10 минут каждым нажатием кнопки «Т». Затем начнется автоматический обратный отсчет, и устройство выключится по истечении времени.


## Меры предосторожностей

- Не прикладывайте массажные накладки в область сердца, чувствительным частям черепа, к шрамам, на горле или над ртом.
- Не прикасайтесь к накладкам, когда устройство включено.
- Беременным женщинам следует избегать использования этого массажера. Проконсультируйтесь с вашим врачом.
- Не используйте этот массажер, если у вас есть кардиостимулятор или другое оборудование для жизнеобеспечения, такое как искусственные легкие или респиратор.
- Не используйте его во время вождения, управления механизмами или во время любой деятельности, при которой непроизвольные сокращения мышц могут подвергнуть пользователя риску или травме.
- Рекомендуется использовать 1-2 раза в день.
- Не используйте, если у вас есть следующие заболевания:
  - Острое заболевание, травма или хирургическое вмешательство в течение последних шести месяцев:
  - Нарушение функции сердца
  - Высокое кровяное давление
  - Высокая температура
  - Рак
  - Инфекционное заболевание
  - Злокачественные опухоли
  - Недавняя операция
  - Проблемы с кожей
  - Беременность
  - Не диагностированные болевые синдромы
  - Грыжа паха или живота
  - Болезненные и/или атрофированные мышцы
  - Ограниченный диапазон движений в суставах скелета
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Устройство не предназначено для применения при каких-либо медицинских состояниях или заболеваниях. Оно противопоказано для использования на любых травмированных или больных мышцах, поверх травмированной кожи.

## Уход и обслуживание

1. После окончания использования выключите миостимулятор и снимите наклейки. Храните прибор в сухом и прохладном месте до следующего использования.
2. Накройте наклейки защитной пленкой и положите их обратно в упаковку.
3. Заряжайте прибор не реже одного раза в 3 месяца, если он не используется регулярно.

## Знакомство с устройством

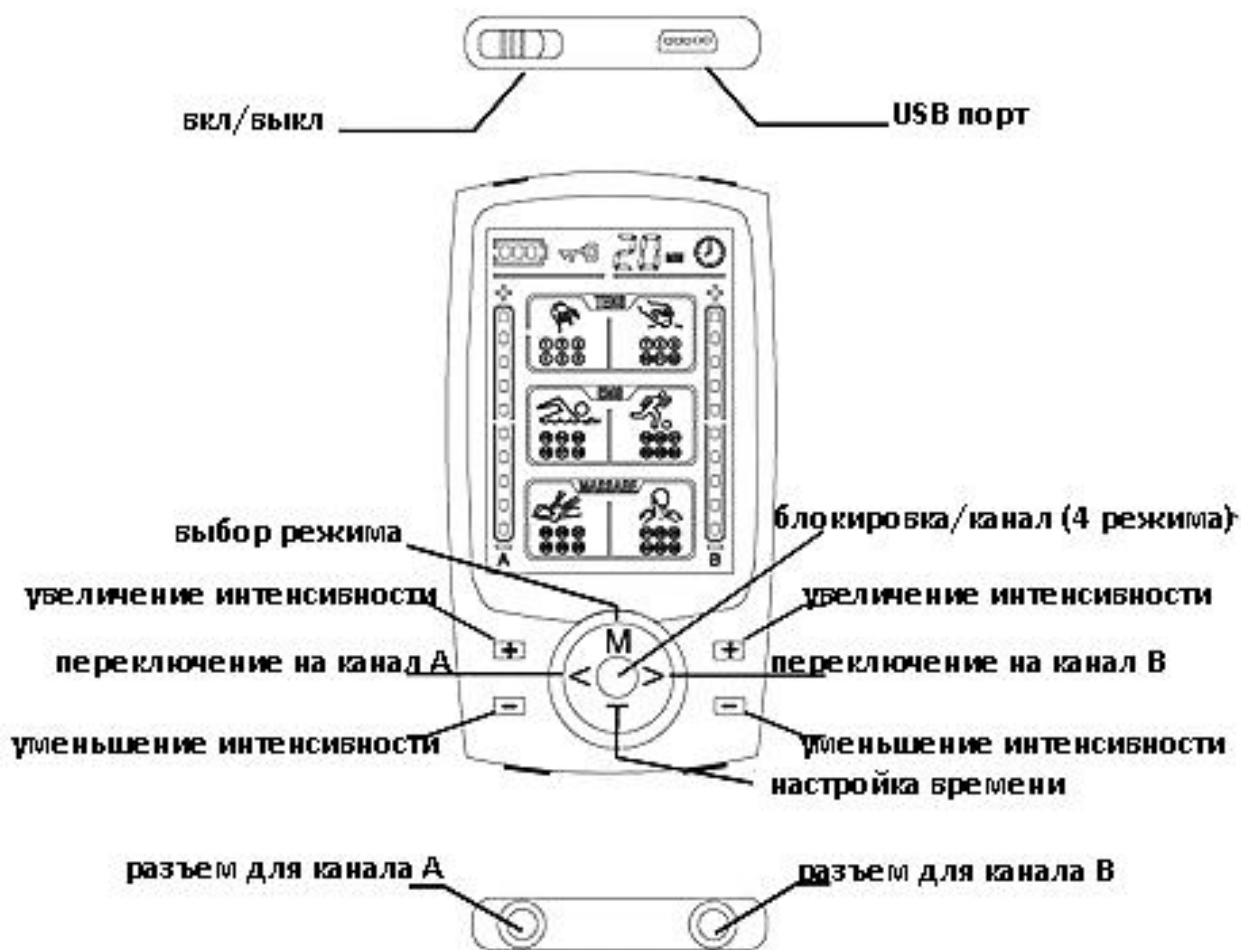

Количество 36 режимов

1. Акупунктура (1-6 режимов)
2. Баночная терапия (7-12 режимов)
3. Мышечная релаксация (13-18 режимов)
4. Режим бега (19-24 режима)

5. Массаж спины (25-30 режимов)

6. Массаж шеи и плеч (31-36 режимов)

### Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Одна накладка работает сильнее другой	Это нормально. Разные участки кожи будут по-разному реагировать на стимуляцию	Ничего не нужно делать. Убедитесь, что накладки влажные и хорошо приклеены.
Во время массажа чувствуется обжигающая боль	Гелевые накладки неплотно прилегают к коже. Или накладки слишком сухие.	Нанесите несколько капель воды на поверхность каждой подушечки и убедитесь, что накладки плотно прижаты к коже во время применения. Убедитесь, что обе накладки плотно прижаты к коже.
Устройство включено, но никакой стимуляции не происходит	Обе накладки неплотно прилегают к коже. Или соединение неплотное. Или необходимо увеличить уровень интенсивности.	Убедитесь, что все соединения от устройства до проводов и от проводов до накладок надежно закреплены. Увеличьте уровень интенсивности.
Накладки не приклеиваются даже после чистки и смачивания	Гелевые накладки необходимо заменить.	Замените комплект накладок, накладки можно приобрести на Amazon.
Устройство не включается или экран тусклый	Батарея разряжена.	Зарядите аккумулятор.
Не обеспечивает адекватного облегчения боли.	Недостаточно долго использовалось.	Рекомендуется использовать массажер по 30–60 минут за раз, 1–2 раза в день.

## Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

## Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.



В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;

- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!