



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Реабилитационная роботизированная перчатка Rehab Glove Blue, левая М



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Подготовка	3
Иллюстрация.....	3
Знакомство с устройством.....	3
Надевание перчатки	4
Использование	5
Показания и противопоказания	7
Показания	7
Противопоказания.....	8
Ответы на вопросы	8
Меры предосторожности.....	9
Уход и обслуживание	9
Хранение и транспортировка.....	10
Комплектация	10
Правильная утилизация.....	10
Гарантийное обслуживание неисправного товара	11
Товар надлежащего качества.....	14
Товар ненадлежащего качества.....	14

Введение


Подготовка

Целью данного руководства пользователя является предоставление пользователям базовой информации об устройстве и помощь пользователям в быстром и точном использовании продукта. Данное руководство описывает все функции, используемые пользователем.


Иллюстрация



Знакомство с устройством

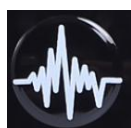

Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить силу /увеличить силу [уровни от 1 до 9].

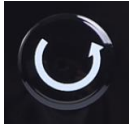

Нажмите эту кнопку для переключения режима тренировки [пассивный режим, зеркальный режим, противодействующий режим].



Кнопка питания: нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы включить устройство; нажмите один раз, чтобы выключить.



Иконка пассивного режима.



Иконка зеркального режима.



Иконка противодействующего режима.

Надевание перчатки



После надевания перчатки, запустите основное устройство, чтобы начать тренировку.

Использование

1. Надевание тренировочных перчаток:

- Постарайтесь полностью выпрямить пальцы до упора в перчатке.
- Застегните липучку на запястье как можно плотнее, чтобы избежать ослабления во время тренировки.
- Толстые ремни фиксируйте в области большого пальца, а тонкие ремни используйте для фиксации остальных пальцев.
- Если один из пальцев свободен или перчатка легко слетает, используйте тонкие ремни для дополнительной фиксации.

2. Подключение к хосту:

- Поверните разъем перчатки и вкрутите его в разъем на левой стороне хоста.
- Убедитесь, что разъем надежно закреплен. Хост работает за счет подачи воздуха, поэтому разъем довольно тугой и не вставляется напрямую.

3. Надевание зеркальной перчатки:

- Зеркальная перчатка надевается на здоровую руку.
- Зеркальная перчатка доступна только для моделей, оснащенных функцией зеркальной тренировки. Если такая модель не была приобретена, зеркальная перчатка отсутствует.

Функции

1. Включение питания:

- Нажмите кнопку включения, чтобы запустить устройство.
- Для моделей с подключением к сети сначала вставьте вилку в розетку, затем включите устройство.

2. Пассивная тренировка:

- После включения устройства оно автоматически переходит в режим пассивной тренировки.
- Первая иконка слева на хосте загорается, перчатки начинают пассивно сжиматься и разжиматься.
- Нажмите третью кнопку справа на хосте для регулировки силы (1-9 уровней). Чем выше уровень, тем сильнее усилие и длительнее время работы.

3. Зеркальная тренировка:

- В режиме включения нажмите первую кнопку справа на хосте (кнопка переключения режима).
- Загорится вторая иконка слева, и перчатки начнут постоянно разжиматься. Это означает, что зеркальный режим включен.
- Нажмите и удерживайте кнопку на ладони зеркальной перчатки, чтобы перчатка для тренировки сжалась в кулак. Отпустите кнопку, чтобы тренировочная перчатка разжалась. Повторение этих действий — процесс зеркальной тренировки.

4. Противодействующая тренировка:

- Включите устройство и дважды нажмите первую кнопку справа на хосте (кнопка переключения режима).
- Загорится третья иконка слева, указывая на включение противодействующего режима.
- Для выполнения тренировки:
 - Когда перчатка сжимается, вы должны разогнуть пальцы.
 - Когда перчатка разжимается, вы должны сжать кулак, преодолевая усилие перчатки.
- Этот режим используется на поздних этапах реабилитации.

5. Тренировка разделения пальцев:

- Поверните клапан на задней стороне перчатки, чтобы закрыть воздушный канал пальца (горизонтальное положение) или открыть его (вертикальное положение).

- **Примечание:** Максимальное время закрытия воздушного канала — не более 5 минут за один раз.
- Эта функция доступна только в моделях с возможностью разделения пальцев.

Примечание

- Отверстия для вентиляции и теплоотвода хоста расположены снизу, поэтому устройство должно быть чистым и хорошо проветриваемым.
- Не размещайте хост на кровати или полу.
- Повреждения из-за неправильного использования не покрываются гарантией.

Показания и противопоказания

Показания

1. Дисфункция верхних конечностей (рук), вызванная заболеваниями нервной системы, такими как повреждение центральной нервной системы, периферических нервов, сдавление нервов и др.
2. Дисфункция верхних конечностей и рук, вызванная заболеваниями скелетных мышц.
3. Нарушение функции рук, вызванное опухолями.
4. Дисфункция верхних конечностей и рук вследствие травм (например, ссадины, размозжения, порезы, ожоги, травмы от растяжения и т.д.).
5. Отёк после травмы верхней конечности, включая нарушение артериального и венозного кровообращения, а также лимфатического оттока до и после операции.
6. Дисфункция рук, вызванная контрактурами и гиперплазией рубцовой ткани.

Противопоказания

1. Незажившие послеоперационные раны.
2. Повреждения мягких тканей.
3. Локальные кожные инфекции.
4. Травматические гематомы.
5. Переломы и задержка их заживления.
6. Переломы суставов и другие невыявленные случаи.
7. Ранний этап фиксации перелома и сращения сухожилий.
8. Остеопороз.
9. Опухоли костей.
- 10.Оссифицирующий миозит.
- 11.Склонность к кровотечениям и заболевания, сопровождающиеся кровотечениями.
- 12.Артериовенозные обструктивные поражения.
- 13.Люди с нарушением чувствительности.
- 14.Пациенты, которым врач категорически запретил реабилитационные тренировки.

Ответы на вопросы

Вопрос: Сколько времени потребуется, чтобы увидеть эффект?

Ответ: После инсульта процесс восстановления пластичности мозга длительный и не дает мгновенных результатов. Улучшения происходят постепенно через терапию движений (РТ). Условия пациента, курс лечения и эффективность реабилитации могут сильно различаться. Обычно восстановление функции руки идет медленнее, чем других частей тела, поэтому в процессе реабилитации необходимы как пассивные, так и активные упражнения. Их сочетание обеспечивает наилучший эффект.

Вопрос: Как использовать реабилитационный тренажер для восстановления функции руки?

Ответ: Рекомендуется подбирать подходящее количество тренировок и

методы в зависимости от вашей ситуации. Обычно устройство можно использовать 2–4 раза в день по 20 минут. Не следует превышать это время. Если на следующий день после тренировки вы ощущаете боль или усталость в руке, нужно сократить количество тренировок.

Меры предосторожности

1. Перед тренировкой убедитесь, что рука для тренировки не жесткая. Если рука жесткая, проведите ручной массаж, теплый компресс и гибкую разминку, чтобы смягчить мышцы. Тренировку можно начинать только после подготовки.
2. Не используйте устройство в одиночку для людей в бессознательном состоянии или для маленьких детей.
3. Людям с растяжениями, травмами, неизвестными повреждениями костей, тяжелым остеопорозом, а также тем, кому требуется фиксация после лечения перелома, не следует использовать устройство без консультации с профессионалом.
4. Время одной тренировки не должно превышать 20 минут. Перед повторным использованием устройству нужно дать полностью остыть, выдержав не менее 30 минут.

Уход и обслуживание

1. **Перчатки не рекомендуется стирать.** Протрите их мягкой тканью, смоченной в воде или нейтральном моющем средстве, а затем тщательно отожмите ткань. При необходимости можно использовать ткань с небольшим количеством спирта для дезинфекции. Перед использованием дождитесь полного высыхания.
2. **Не используйте адаптер питания, не входящий в комплект устройства.** Держите штекер питания сухим, избегайте попадания воды. Не допускайте использование устройства бессознательными людьми и детьми.

Хранение и транспортировка

1. **Транспортировка:** Этот продукт не должен транспортироваться вместе с коррозионными веществами. Избегайте сильного давления при перевозке, а также прямого солнечного света, дождя и снега.
2. **Хранение:** Упакованный продукт должен храниться в хорошо проветриваемом и чистом помещении, без сильного давления, вдали от источников огня и прямого солнечного света. Нельзя хранить вместе с коррозионными веществами.

Комплектация

Корпус – 1 шт;

Тренировочная перчатка – 1 шт;

Зеркальная перчатка – 1 шт;

Зарядка – 1 шт;

Руководство – 1 шт;

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными

способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;

- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;

- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!